



Notkunarleiðbeiningar



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Vörulýsing

Halo Vents eru lækningatæki sem samanstanda af límandi hlaupi og límandi ytra lagi (ekki úr latexi). Halo Vents innihalda engin lyf og eru ekki unnin úr dýra- eða mannaafurðum. Halo Vents eru ógegnðræp gegn vökvum og innsigla sárið. Halo Vents eru ætluð til notkunar þar til hægt er að flytja sjúklinginn á heilsugæslustöð þar sem varan er fjarlægð til að leggja mat á ástand sjúklingsins og veita honum eftirmeðferð.

Ábendingar um notkun

Halo Vents vörurnar eru hannaðar sem hluti af meðhöndlun á sárum á brjóstkaða samkvæmt staðlaðri umbúðaaðferð sem heilbrigðisstarfsfólk og neyðarviðbragðsaðilar beita fyrir komu sjúklunga á sjúkrahús. Halo Vents eru hannaðar til að hylja og verja sár. Umbúðunum er ekki ætlað að koma í stað sauma eða annarra aðferða við að loka sárum. Halo Vents er einnota vara. Ef reynt er að endurnota Halo Vents, getur það leitt til mengunar og sýkinga.

Fyrirhuguð notkun/fyrirhugaður tilgangur

Með Halo Vents er hægt að losa loft úr sárum á brjóstkaða / úr brjóstholi. Halo Vents aðstoða við að fyrirbyggja og meðhöndla þrýsting frá loftþrjústi, s.s af völdum áverka á brjóstkaða.

Sjúklingasnið

Halo Vents er fyrirhugað til notkunar hjá sjúklingum með hugsanleg sár á brjóstkaða.

Beiting

1. Hreint og þurr svæði.
2. Takið af glæru filmuna. Ekki setja á annað yfirborð yfir ásetningu að koma í veg fyrir mengun.
3. Leggið hliðina með Halo Vent hlaupinu niður þanig að loftunaropið sé fyrir miðju sárinu.
4. Beitið léttum þrýstingi - ekki teygja við ásetningu.
5. Haldið áfram að meta sjúkling og gætið að virkni vörunnar við að veita loftunaraðgengi að brjóstholi. Hafið eftirlit með sjúklingi með tilliti til þess hvort það sé að myndast þrýstingur út frá loftþrjústi.

Þessi einkenni geta lýst sér sem:

- a. Snarpur verkur í brjóstkaða/brjóstholi, hröð öndun, mæði, hraðtaktur, hraður hjartsláttur við hvíld eða lágur blóðþrýstingur.
- b. Blá eða mislit húð, varir eða neglur eða úþensla hálsbláæða - bungun bláæða sem liggja niður hægra megin á hálsi sjúklingsins.

6. Loftið út og endurinnsglið Halo Vent eftir þörfum.
7. Ef um fleiri sár á brjóstkaða er að ræða þá skal endurtaka skref 1-4 með annarri Halo Vent vöru.
8. Flytja skal sjúkling á bráðamóttöku til að hann geti hlotið eftirmeðferð og gengist undir mat.
9. Fargið eftir notkun samkvæmt gildandi leiðbeiningum um förgun á lækningatækjaúrgangi.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

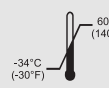

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Notkunarleiðbeiningar



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Varnaðarorð

- Ekki loka fyrir aðgengi að Halo Vent þar sem líkamsþyngd sjúklings eða aðrar neyðarbúnaður kann að teppa opið og þar með dregið úr eða hamlað eðlilega virkni vörunnar.
- Gætið þess að Halo Vent innsigli fyllilega jaðar sársins til að tryggja að loft, vökvar og óhreinindi komist ekki að sárinu. Einstaklingar sem eru með áverka á brjóstkassa skulu fluttir tafarlaust á heilsugæslu eða bráðamóttöku til að hægt sé að meta ástand þeirra.
- Halo Vent er ekki ætlað að koma í stað sauma eða annarra fyrstu aðferða við að loka sárum.
- Ef reynt er að endurnota Halo Vent, getur það leitt til mengunar og sýkinga.
- Fargið eftir notkun samkvæmt gildandi leiðbeiningum um förgun á lækningatækjaúrgangi.
- Ekki setja yfir útstæða hluti þar sem það getur valdið versnun áverka eða valdið skemmdum á loftopum.

Frábendingar

Ekki fyrirhugað til notkunar eftir skurðaðgerðir.

Virknieiginleikar

- Loðir við yfirborð húðarinnar við krefjandi aðstæður og mismunandi umhverfishita, jafnvel þegar raki, fleiðrúvökvi og/ eða blóð er til staðar.
- Umbúðir eru hannaðar til að loka jaðri sársins á áhrifaríkan hátt til að hylja og verja það.
- Með vörunni er hægt að hleypa út lofti úr brjóstholi en hún er ógegndræp með tilliti til vökva, lofts eða óhreininda sem geta borist í sárið utan frá.

Klínískur ávinningur

- Dregur úr hættu á að loft, vökvi eða óhreinindi nái að menga sárið.
- Veitir aukinn tíma neyðartilvikum þar til tekist hefur að flytja sjúklinginn á sjúkrahús eða aðra heilbrigðisstofnun.
- Minni hætta á þrýstingi út frá loftbrjósti.

Klínískar fullyrðingar

- Lokar á áhrifaríkan hátt jaðri sársins, að því gefnu að leiðbeiningum framleiðanda sé fylgt.
- Ógegndræpt lag sem ver gegn vökvum, lofti og óhreinindum sem geta mengað sárið.
- Með vörunni er hægt að tappa af lofti úr brjóstholinu og þar með draga úr hættu á þrýstingi út frá loftbrjósti.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

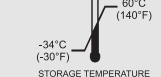

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

