



## Инструкции за употреба



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



### Описание на продукта

Halo Seals са медицински изделия, които се състоят от адхезивен хидрогелен слой и адхезивен (нелатексов) поддържащ слой. Halo Seals не съдържат никакви медицински вещества и не са изградени от животински или човешки производни. Halo Seals са непропускливи за течности и запечатват раната. Halo Seals са предназначени за използване, докато пациентът може да бъде транспортиран до здравно заведение, където ще бъдат отстранени за оценка на пациента и последващи грижи.

### Показания за употреба

Halo Seals са предназначени да покриват и предпазват рани. Не използвайте превръзката като заместител на конци и други първични методи за затваряне на рани. Halo Seals са продукт за еднократна употреба и опитите за повторна употреба на Halo Seals могат да причинят замърсяване и инфекция.

### Употреба по предназначение/Предвидено предназначение

Halo Seals са нерезорбируеми и нестерилни оклузивни превръзки за рани, предназначени да покриват раната и да осигурят механична бариера.

### Профил на пациента

Halo Seals са предназначени за използване при пациенти с потенциална гръдна рана.

### Приложение

1. Чиста и суха зона.
2. Отстранете прозрачната подложка. Не поставяйте върху вторична повърхност преди нанасяне, за да предотвратите замърсяване.
3. Поставете гела Halo Seal със страната надолу, центрирано върху раната.
4. Използвайте лек натиск - не разтягайте по време на нанасяне.
5. Продължете да оценявате пациента и да наблюдавате действието на гръдното уплътнение. Наблюдавайте пациента за симптоми на повишена болка или затруднено дишане.
6. Запечатайте отново Halo Seal, ако е необходимо.
7. Ако има допълнителни гръдни рани, повторете стъпки 1-4 с друг продукт Halo Seal.
8. Транспортирайте пациента до заведението за спешна помощ за последващо лечение и оценка.
9. Изхвърлете след употреба съгласно местните указания за отпадъци от медицински изделия.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

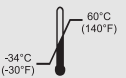

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



# Инструкции за употреба



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



## Предупреждения

- Уверете се, че Halo Seal напълно запечатва периметъра на раната, за да предотврати навлизането на въздух, течности и остатъци. Лицата, които имат наранявания на гръдния кош, трябва незабавно да бъдат транспортирани до здравно заведение или травматологично заведение за оценка.
- Не използвайте Halo Seal като заместител на шевове и други първични методи за затваряне на рани.
- Опитите за повторна употреба на Halo Seal могат да причинят замърсяване и инфекция.
- Изхвърлете след употреба съгласно местните указания за отпадъци от медицински изделия.
- Не поставяйте върху стърчащи предмети, тъй като това може да влоши нараняването.

## Противопоказания

Да не се използва за следоперативни приложения.

## Експлоатационни характеристики

- Прилепва към повърхността на кожата при екстремни условия и температурни диапазони, дори при наличие на влага, плеврални течности и/или кръв.
- Превръзката е предназначена за ефективно уплътняване на периметъра на раната, за да я покрие и защити.
- Запечатва гръдната кухина и е непроницаем за течности, въздух и отломки, които могат да проникнат в раната от външната среда.

## Клинични ползи

- Намалява риска от проникване на въздух, течност или остатъци, които могат да замърсят раната.
- Осигурява допълнително време при спешни случаи до транспортиране на пациента до здравно заведение.

## Клинични претенции

- Ефективно запечатва периметъра на раната, ако се прилага според указанията на производителя.
- Непроницаема за течности, въздух и остатъци, които могат да замърсят раната.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

