



Notkunarleiðbeiningar



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Vörulýsing

Halo Seals eru lækningatæki sem samanstanda af límandi hlaupi og límandi ytra lagi (ekki úr latexi). Halo Seals innihalda engin lyf og eru ekki unnin úr dýra- eða mannaafurðum. Halo Seals er ógegndræpt lag sem ver sárið gegn vökvum og innsiglar sárið. Halo Seals eru ætluð til notkunar þar til hægt er að flytja sjúklinginn á heilsugæslustöð þar sem varan er fjarlægð til að leggja mat á ástand sjúklingsins og veita honum eftirmeðferð.

Ábendingar um notkun

Halo Seals eru hannaðar til að hylja og verja sár. Umbúðunum er ekki ætlað að koma í stað sauma eða annarra aðferða við að loka sárum. Halo Seals er einnota vara og ef reynt er að endurnýta Halo Seals þá getur það valdið mengun og sýkingu.

Fyrirhuguð notkun/fyrirhugaður tilgangur

Halo Seals eru óuppsoganleg og ósæfð lækningatæki, umbúðir til að loka sárum, ætlaðar til að hylja sár og þjóna sem aflfræðilegur tálmi.

Sjúklingasnið

Halo Seals er fyrirhuguð til notkunar hjá sjúklingum með hugsanleg sár á brjóstakassa.

Beiting

1. Hreint og þurrt svæði.
2. Takið af glæru filmuna. Ekki setja á annað yfirborð yfir ásetningu að koma í veg fyrir mengun.
3. Leggið hliðina með Halo Seal hlaupinu niður á mitt sárið.
4. Beitið léttum þrýstingi - ekki teygja við ásetningu.
5. Haldið áfram að meta sjúkling og gætið að því hversu vel varan innsiglar á brjóstakassa. Fylgjast skal með sjúklingnum með tilliti til einkenna um aukna verki eða öndunarerfiðleika.
6. Lagið innsigli Halo Seal eftir þörfum.
7. Ef um fleiri sár á brjóstakassa er að ræða þá skal endurtaka skref 1-4 með annarri Halo Seal vöru.
8. Flytja skal sjúkling á bráðamóttöku til að hann geti hlotið eftirmeðferð og gengist undir mat.
9. Fargið eftir notkun samkvæmt gildandi leiðbeiningum um förgun á lækningatækjaúrgangi.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

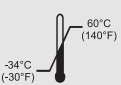

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Notkunarleiðbeiningar



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Varnaðarorð

- Gætið þess að Halo Seal innsigli fyllilega jaðar sársins til að tryggja að loft, vökvar og óhreinindi komist ekki að sárinu. Einstaklingar sem eru með áverka á brjóstkassa skulu fluttir tafarlaust á heilsugæslu eða bráðamóttöku til að hægt sé að meta ástand þeirra.
- Halo Seal er ekki ætlað að koma í stað sauma eða annarra fyrstu aðferða við að loka sárum.
- Ef reynt er að endurnota Halo Seal, getur það leitt til mengunar og sýkinga.
- Fargið eftir notkun samkvæmt gildandi leiðbeiningum um förgun á lækningatækjaúrgangi.
- Ekki setja yfir útstæða hluti þar sem það getur valdið versnun áverka.

Frábendingar

Ekki fyrirhugað til notkunar eftir skurðaðgerðir.

Virknieiginleikar

- Loðir við yfirborð húðarinnar við krefjandi aðstæður og mismunandi umhverfishita, jafnvel þegar raki, fleiðruvökvi og eða blóð er til staðar.
- Umbúðir eru hannaðar til að loka jaðri sársins á áhrifaríkan hátt til að hylja og verja það.
- Innsigliar brjóstholið með ógegndræpu lagi sem ver gegn vökvum, lofti og óhreinindum sem geta borist í sárið utan frá.

Klínískur ávinningur

- Dregur úr hættu á að loft, vökvi eða óhreinindi nái að menga sárið.
- Veitir aukinn tíma neyðartilvikum þar til tekist hefur að flytja sjúklinginn á sjúkrahús eða aðra heilbrigðisstofnun.

Klínískar fullyrðingar

- Lokar á áhrifaríkan hátt jaðri sársins, að því gefnu að leiðbeiningum framleiðanda sé fylgt.
- Ógegndræpt lag sem ver gegn vökvum, lofti og óhreinindum sem geta mengað sárið.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

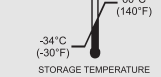

-34°C (-30°F) 60°C (140°F) STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

