



Instrucțiuni de utilizare



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Descrierea produsului

Sigiliile Halo sunt dispozitive medicale formate dintr-un strat de hidrogel adeziv și un strat suport adeziv (fără latex). Sigiliile Halo nu conțin substanțe medicinale și nu sunt fabricate din derivate animale sau umane. Sigiliile Halo sunt impermeabile la lichide și sigilează rana. Sigiliile Halo sunt destinate utilizării până când pacientul poate fi transportat la o unitate medicală, unde vor fi îmorate pentru evaluarea și tratamentul ulterior al pacientului.

Indicații de utilizare

Sigiliile Halo sunt concepute pentru a acoperi și proteja rănilor. Nu utilizați pansamentul ca substitut pentru suturi sau alte metode primare de închidere a rănilor. Sigiliile Halo sunt produse de unică folosință, iar încercările de reutilizare pot duce la contaminare și infecții.

Scopul/Utilizarea prevăzută

Sigiliile Halo sunt pansamente ocluzive, neresorbabile și nesterile, destinate acoperirii unei răni și furnizării unei bariere mecanice.

Profilul pacientului

Sigiliile Halo sunt destinate utilizării la pacienții cu potențiale plăgi toracice.

Aplicare

1. Curățați și uscați zona.
2. Îndepărați folia de protecție transparentă. Nu așezați pe o suprafață secundară înainte de aplicare pentru a preveni contaminarea.
3. Așezați Sigiliul Halo cu partea cu gel orientată în jos, centrat peste rană.
4. Aplicați presiune ușoară - nu întindeți în timpul aplicării.
5. Continuați să evaluați pacientul și să monitorizați acțiunea sigiliului toracic. Monitorizați pacientul pentru simptome de durere crescută sau dificultăți respiratorii.
6. Reaplicați Sigiliul Halo, dacă este necesar.
7. Dacă sunt prezente alte plăgi toracice, repetați pașii 1-4 cu un alt produs Sigiliu Halo.
8. Transportați pacientul la o unitate de îngrijire de urgență pentru tratament ulterior și evaluare.
9. Aruncați după utilizare, conform reglementărilor locale privind deșeurile dispozitivelor medicale.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

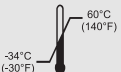

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Instrucțiuni de utilizare



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Avertismente

- Asigurați-vă că Sigiliul Halo sigilează complet perimetrul răni pentru a preveni pătrunderea aerului, lichidelor și resturilor. Persoanele cu răni toracice trebuie transportate imediat la o unitate medicală sau de traumatologie pentru evaluare.
- Nu utilizați Sigiliul Halo ca substitut pentru suturi sau alte metode primare de închidere a răni.
- Încercările de reutilizare pot duce la contaminare și infecții.
- Aruncați după utilizare, conform reglementărilor locale privind deșeurile dispozitivelor medicale.
- Nu așezați peste obiecte proeminente, deoarece acest lucru poate agrava rănirea

Contraindicații

Nu utilizați pentru aplicații postoperatorii.

Caracteristici de performanță

- Aderă la suprafața pielii în condiții extreme și intervale de temperatură variate, chiar și în prezența umezelii, lichidelor pleurale sau sângelui.
- Pansamentul este proiectat pentru a sigila eficient perimetrul răni pentru a o acoperi și proteja.
- Sigilează cavitatea toracică și este impermeabil la lichide, aer și resturi care ar putea pătrunde în rană din mediul extern.

Beneficii clinice

- Reduce riscul de pătrundere a aerului, lichidelor sau resturilor care ar putea contamina rana.
- Oferă timp suplimentar în cazuri de urgență până când pacientul este transportat la o unitate medicală.

Afirmații clinice

- Sigilează eficient perimetrul răni, dacă este aplicat conform instrucțiunilor producătorului.
- Impermeabil la lichide, aer și resturi care ar putea contamina rana.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

