



Bruksanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Produktbeskrivning

Halo-tätningen är en medicinsk produkt bestående av ett självhäftande hydrogellager samt ett självhäftande lager i icke-latexmaterial). Halo-tätningen innehåller inga medicinska ämnen samt har inte framställts av derivat från djur eller människa. Halo-tätningen släpper inte igenom vätska och tätar såret. Halo-tätningen är avsedd att användas tills patienten kan transporteras till en sjukvårdsinrättning, där den sedan kan avlägsnas för patientundersökning och vidare vård.

Användningsinstruktioner

Halo-tätningen är avsedd att täcka och skydda sår. Använd inte förbandet som ett substitut för suturer och andra primära sätt att försluta sår. Halo-tätningen är en engångsprodukt och försök att återanvända den kan försöka förorening och infektion.

Avsedd användning/avsett syfte

Halo-tätningen är ett icke-resorberbart och icke-sterilt sårförband avsett att täcka ett sår och generera en mekanisk barriär.

Patientprofil

Halo-tätningen är avsedd att användas på patienter med misstänkt skada på bröstkorgen.

Applicering

1. Rengör och torka området.
2. Avlägsna den genomskinliga skyddsfilm. I syfte att förhindra förorening, placera ej på annan yta före applicering.
3. Placera Halo-tätningen med gel-sidan nedåt centralt över såret.
4. Använd lättare tryck - sträck ej ut i samband med applicering.
5. Fortsätt studera patienten och observera brösttätningens beteende. Observera patienten för symptom på ökad smärta eller andningssvårigheter.
6. Återförsegla Halo-tätningen vid behov.
7. Om ytterligare skador föreligger på bröstkorgsområdet, upprepa då steg 1-4 med ytterligare Halo-tättningsprodukt.
8. Överför patienten till en plats för akutsjukvård för efterbehandling och bedömning.
9. Kassera efter användning i enlighet med lokala riktlinjer för avyttrande av medicinskt avfall.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE, DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

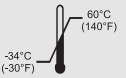

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Bruksanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Varningar

- Säkerställ att Halo-tätningen helt tätar området kring såret, detta för att förhindra att luft, vätska eller smuts tränger in. Personer med skador på bröstkorgen måste omgående transporteras till en sjukvårds- eller traumaanläggning för bedömning.
- Använd inte Halo-tätningen som ett substitut för suturer och andra primära sätt att försluta sår.
- Försök att återanvända Halo-tätningen kan förorsaka föroreningar och infektioner.
- Kassera efter användning i enlighet med lokala riktlinjer för avyttrande av medicinskt avfall.
- Placera aldrig ovanpå utträngande objekt då detta kan förvärra en skada.

Kontraindikationer

Använd ej för tillämpning efter operation.

Prestandaegenskaper

- Fäster vid hudens yta även vid extrema förhållanden och temperaturer samt vid förekomst av fukt, pleuravätska och/eller blod.
- Förbandet är avsett att på ett effektivt sätt försegla området runt ett sår i syfte att täcka över samt skydda det.
- Tätar brösthålan och skyddar mot vätskor, luft och smuts som skulle kunna tränga in i såret från den externa miljön.

Kliniska fördelar

- Minskar risken för inträngande luft, vätska och smuts som skulle kunna förorena såret.
- Vinner tid i akuta fall, tills patienten kan transporteras till en sjukvårdsinrättning.

Kliniska anspråk

- Tätar effektivt området kring såret om den appliceras enligt tillverkarens instruktioner.
- Släpper ej igenom vätska, luft eller smuts som skulle kunna förorena såret.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN




NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED



DO NOT REUSE

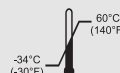

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

