



Upute za upotrebu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Opis proizvoda

Halo XLs medicinski su proizvodi koji se sastoje od sloja ljepljivog hidrogela i sloja ljepljive podloge (bez lateksa). Proizvodi Halo XLs ne sadržavaju ljekovite tvari i nisu proizvedeni od prerađevina životinjskog ili ljudskog podrijetla. Halo XLs ne propuštaju tekućine i zatvaraju ranu. Proizvodi Halo XLs namijenjeni su upotrebi dok se pacijent ne preveze u zdravstvenu ustanovu gdje će se ukloniti radi procjene pacijenta i daljnje skrbi.

Indikacije za upotrebu

Proizvodi Halo XLs osmišljeni su za prekrivanje i zaštitu rana. Nemojte upotrebljavati zavoj kao zamjenu za šavove i ostale primarne metode za zatvaranje rana. Halo XLs namijenjeni su za jednokratnu upotrebu, a pokušajima ponovne upotrebe proizvoda Halo XLs mogu se unijeti onečišćenja i infekcija.

Namjena/svrha

Proizvodi Halo XLs neresorptivni su i nesterilni, okluzivni zavoji za rane namijenjeni za prekrivanje rane i osiguravanje mehaničke barijere.

Profil pacijenta

Proizvodi Halo XLs namijenjeni su za upotrebu u pacijenata s potencijalnom ranom na prsištu.

Primjena

1. Očistite i osušite područje.
2. Skinite prozirnu oblogu. Nemojte postavljati na sekundarnu površinu prije primjene da biste spriječili kontaminaciju.
3. Postavite Halo XL tako da je strana s gelom okrenuta prema dolje na sredinu rane.
4. Lagano pritisnite - nemojte rastezati tijekom nanošenja.
5. Nastavite s procjenom pacijenta i praćenjem zatvaranja rane na prsima. Pratite javljaju li se kod pacijenta simptomi pojačane boli ili otežanog disanja.
6. Ponovno zalijepite Halo XL, ako je potrebno.
7. Ako su prisutne dodatne rane na prsištu, ponovite korake 1 – 4 drugim proizvodom Halo XL.
8. Prevezite pacijenta u ustanovu za hitnu pomoć radi naknadne obrade i procjene.
9. Odložite u otpad nakon upotrebe u skladu sa smjernicama o otpadnim medicinskim proizvodima.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

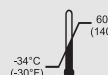

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obel s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Upute za upotrebu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Upozorenja

- Pobrinite se da Halo XL potpuno zatvori perimetar rane kako bi se spriječio ulazak zraka, tekućina i nečistoća. Osobe s ranama na prsištu treba odmah prevesti u ustanovu za zdravstvenu skrb ili traume radi procjene.
- Nemojte upotrebljavati Halo XL kao zamjenu za šavove i ostale primarne metode zatvaranja rana.
- Pokušajima ponovne upotrebe proizvoda Halo XL možete unijeti kontaminaciju i infekciju.
- Odložite u otpad nakon upotrebe u skladu sa smjernicama o otpadnim medicinskim proizvodima.
- Nemojte stavljati preko izbočenih predmeta jer time možete pogoršati ozljedu.

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati za postkirurške primjene.

Karakteristike učinkovitosti

- Prianja za površinu kože u ekstremnim uvjetima i rasponima temperature, čak i u prisutnosti vlage, pleuralnih tekućina i/ili krvi.
- Obloga je osmišljena za učinkovito zatvaranje perimetra rane radi prekrivanja i zaštite.
- Zatvara prsnu šupljinu i ne propušta tekućine, zrak i nečistoće koje mogu prodrijeti u ranu iz vanjskog okruženja.

Kliničke koristi

- Smanjuje rizik od prodora zraka, tekućine ili nečistoća koje mogu kontaminirati ranu.
- Osigurava dodatno vrijeme u hitnim slučajevima dok se pacijent ne preveze u zdravstvenu ustanovu.

Kliničke tvrdnje

- Učinkovito zatvara perimetar rane ako se primijeni prema uputama proizvođača.
- Ne propušta tekućinu, zrak i nečistoće koje mogu kontaminirati ranu.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN




NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NON STERILE

DO NOT REUSE

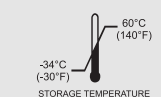

-34°C (-30°F)

STORAGE TEMPERATURE

60°C (140°F)

STORAGE TEMPERATURE

MD

MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

