



Návod k použití



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Popis produktu

Halo XL je zdravotnický prostředek, který se skládá z přilnavé hydrogelové vrstvy a přilnavé (nelatexové) podkladové vrstvy. Krytí Halo XL neobsahuje žádné léčivé látky a není vyrobeno z lidských ani zvířecích derivátů. Krytí Halo XL nepropouští kapaliny a utěšňuje ránu. Krytí Halo XL je určeno k použití, než bude možné pacienta převést do zdravotnického zařízení, kde bude odstraněno k posouzení pacienta a následné péči.

Indikace k použití

Krytí Halo XL je určeno k zakrytí a ochraně ran. Nepoužívejte krytí jako náhradu šití a dalších primárních metod uzavírání rány. Krytí Halo XL je jednorázový produkt a pokusy o opakované použití krytí Halo XL mohou způsobit kontaminaci a infekci.

Určené použití / Zamýšlený účel

Halo XL je neresorbovatelné a nesterilní okluzivní krytí na rány určené k zakrytí rány a zajištění mechanické bariéry.

Profil pacienta

Krytí Halo XL je určené k použití u pacientů s potenciálním poraněním hrudníku.

Aplikace

1. Oblast vyčistěte a vysušte.
2. Sejměte čirou fólii. Před aplikací neumísťujte na sekundární povrch, aby nedošlo ke kontaminaci.
3. Umístěte krytí Halo XL gelovou stranou dolů na střed přes ránu.
4. Lehce přitlačte – při aplikaci neroztahujte.
5. Průběžně pacienta vyhodnocujte a sledujte chování hrudního krytí. Sledujte pacienta, zda se neobjeví příznaky zvýšené bolesti nebo dýchacích potíží.
6. V případě potřeby krytí Halo XL opětovně utěsněte.
7. Pokud jsou na hrudníku další rány, opakujte kroky 1–4 s dalším produktem Halo XL.
8. Převezte pacienta do zařízení urgentní péče k následnému ošetření a vyhodnocení.
9. Po použití zlikvidujte podle místních předpisů pro odpadní zdravotnické prostředky.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Návod k použití



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Upozornění

- Zajistěte, aby krytí Halo XL zcela utěsnilo okolí rány, aby se do ní nedostaly vzduch, kapaliny a nečistoty. Osoby s poraněním hrudníku je nutné neprodleně převést do zdravotnického nebo traumatologického zařízení k vyšetření.
- Nepoužívejte krytí Halo XL jako náhradu za šití a další primární metody uzavírání rány.
- Pokusy o opakované použití krytí Halo XL mohou způsobit kontaminaci a infekci.
- Po použití zlikvidujte podle místních předpisů pro odpadní zdravotnické prostředky.
- Neumísťujte přes vyčnívající předměty, protože by se tím mohlo zhoršit zranění.

Kontraindikace

Nepoužívejte pro pooperační aplikace.

Výkonnostní charakteristiky

- Přilne k povrchu kůže v extrémních podmínkách a teplotních rozmezích, i za přítomnosti vlhkosti, pohrudničních tekutin či krve.
- Krytí je navrženo k účinnému utěsnění okolí rány, aby byla zakrytá a chráněná.
- Utěsňuje hrudní dutinu a nepropouští kapaliny, vzduch a nečistoty, které by mohly do rány pronikat z vnějšího prostředí.

Klinický přínos

- Snižuje riziko vniknutí vzduchu, kapalin nebo nečistot, které by mohly kontaminovat ránu.
- V urgentních případech poskytuje čas navíc na převoz pacienta do zdravotnického zařízení.

Klinická tvrzení

- Při aplikaci podle pokynů výrobce účinně utěsňuje okolí rány.
- Nepropouští kapaliny, vzduch a nečistoty, které by mohly kontaminovat ránu.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN




NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED



DO NOT REUSE

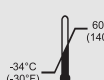

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

