



Használati útmutató



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Termékleírás

A Halo-sebtapaszk olyan orvostechikai eszközök, amelyek egy öntapadós hidrogél rétegből és egy öntapadós (nem latex) hátlapból állnak. A Halo-sebtapaszk semmiféle gyógyászati anyagot, sem állati vagy emberi eredetű származékot nem tartalmaznak. A Halo-sebtapaszk vízhatlanok, és a sebeket szigetelten lezárják. A Halo-sebtapaszk feladata, hogy a sebet mindaddig megóvják, amíg a beteget egészségügyi intézménybe nem szállítják, ahol a beteg állapotának értékelése és utógondozás céljából eltávolításra kerülnek.

Használati útmutató

A Halo-sebtapaszk a sebek fedésére és védelmére szolgálnak. Ne használja a sebtapaszt a varratok és más elsődleges sebzárási módszerek helyettesítése gyanánt. A Halo-sebtapaszk egyszer használatos termékek, és újrafelhasználásuk szennyeződést és fertőzést okozhat.

Rendeltetészerű használat/rendeltetési cél

A Halo-sebtapaszk nem felszívódó és nem steril, okkluzív sebkötészek, amely a seb fedésére és egyfajta mechanikai gát biztosítására szolgálnak.

Betegprofil

A Halo-sebtapaszk potenciális mellkasi sebbel rendelkező betegeknél alkalmazhatók.

Alkalmazás

1. Tisztítsa és szárítsa meg az alkalmazási területet.
2. Távolítsa el az átlátszó hátlapot. A fertőzések elkerülése érdekében ne helyezze másodlagos felületre.
3. Helyezze a Halo-sebtapaszt a zselés oldallal lefelé a seb közepére.
4. Enyhén nyomja meg, és ügyeljen arra, hogy ne nyújtsa meg.
5. Folytassa a beteg állapotának felmérését, és figyelje a mellkasi zárókötés hatékonyságát. Figyelje a beteget a fájdalom vagy légzési nehézség tüneteinek fokozódásának szempontjából.
6. Ha szükséges, zárja le újra a Halo-sebtapaszt.
7. Ha a betegen több mellkasi seb is van, ismétlje meg az 1-4. lépést egy újabb Halo-sebtapaszk termékkel.
8. Szállítsa a beteget a sürgősségi ellátó intézménybe utókezelésre és értékelésre.
9. Használat után a terméket a helyi orvosi eszékzhulladék-irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

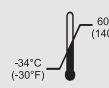

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Használati útmutató



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Figyelmeztetések

- Győződjön meg arról, hogy a Halo-sebtapasz teljesen lezárja-e a seb területét annak érdekében, hogy megakadályozza a levegő, folyadékok és szennyeződések bejutását. A mellkasi sérüléseket szenvedett személyeket szállítsa azonnal egészségügyi vagy traumatológiai intézménybe, állapotuk felmérésének céljából.
- Ne használja a Halo-sebtapaszt varratok és más seblezárási módszerek helyettesítésére.
- A Halo-sebtapasz újrafelhasználása szennyeződést és fertőzést okozhat.
- Használat után a terméket a helyi orvosi eszkozhulladék-irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne helyezze kiálló tárgyak fölé, mert ez súlyosbíthatja a sérülést.

Ellenjavallatok

Műtét utáni esetek során ne használja.

Teljesítményjellemzők

- Még szélsőséges körülmények és hőmérsékleti tartományok között is megtapad a bőrfelületen, nedvesség, mellhártyán lévő folyadékok és vér jelenléte ellenére is.
- A kötés kialakításának köszönhetően hatékonyan lezárja a seb területét, hogy annak fedést és védelmet biztosítson.
- Lezárja a mellüreget, és áthatolhatatlan a külső környezetből a sebbe behatoló folyadékokkal, levegővel és szennyeződésekkel szemben.

Klinikai előnyök

- Csökkenti a levegő, folyadék vagy törmelék bejutásának kockázatát, amelyek szennyezheti a sebet.
- Sürgős esetekben többletidőt biztosít, amíg a beteget egészségügyi intézménybe nem szállítják.

Klinikai megállapítások

- A gyártó utasításainak megfelelően alkalmazva a sebet hatékonyan körbezárja.
- Áthatolhatatlan a folyadékkal, levegővel és egyéb szennyeződésekkel szemben.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN




NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED



DO NOT REUSE

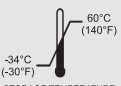

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

