



Lietošanas instrukcijas



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Produkta apraksts

Halo XLs ir medicīniskās ierīces, kas sastāv no lipīga hidrogēla slāņa un adhezīva (bez lateksa) pamatslāņa. Halo XLs nesatur nekādas ārstnieciskas vielas un nav izgatavotas no dzīvnieku vai cilvēku atvasinājumiem. Halo XLs ir šķidrums necaurlaidīgas un hermetizē brūci. Halo XLs ir paredzētas lietošanai līdz brīdim, kad pacientu var nogādāt veselības aprūpes iestādē, kur tās tiks izņemtas pacienta novērtēšanai un pēcprūpei.

Lietošanas norādījumi

Halo XLs ir paredzētas brūču segšanai un aizsardzībai. Neizmantojiet pārsēju kā šuvju un citu primāro brūču aizvēršanas metožu aizstājēju. Halo XLs ir vienreiz lietojams produkts, un mēģinājumi izmantot Halo XLs atkārtoti var izraisīt piesārņojumu un infekciju.

Paredzētā izmantošana/Paredzētais mērķis

Halo XLs ir neresorbējams un nesterils, okluzīvs brūču pārsējs, kas paredzēts brūces noseģšanai un mehāniskas barjeras nodrošināšanai.

Pacienta profils

Halo XLs ir paredzētas lietošanai pacientiem ar iespējamu krūšu kurvja brūci.

Izmantošana

1. Notīriet un nosusiniet uzlikšanas zonu.
2. Noņemiet caurspīdīgu pārklājumu. Nenovietojiet uz sekundārās virsmas pirms uzklāšanas, lai novērstu piesārņojumu.
3. Novietojiet Halo XL ar gēla pusi uz leju ar centru virs brūces.
4. Pielietojiet vieglu spiedienu – nestiepiet uzklāšanas laikā.
5. Turpiniet novērtēt pacientu un uzraudzīt krūškurvja hermetizēšanas darbību. Kontrolējiet, vai pacientam nerodas pastiprinātas sāpes vai apgrūtinātas elpošanas simptomi
6. Ja nepieciešams, atkārtoti uzklājiet Halo XL.
7. Ja ir papildu krūšu kurvja brūces, atkārtojiet 1.–4. darbību ar citu Halo XL produktu.
8. Nogādājiet pacientu uz neatliekamās palīdzības iestādi pēcārstēšanai un stāvokļa novērtēšanai.
9. Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnisko ierīču atkritumu utilizēšanas vadlīnijām.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

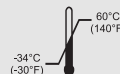

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Lietošanas instrukcijas



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Brīdinājumi

- Pārliecinieties, ka Halo XL pilnībā hermetizē brūces perimetru, lai novērstu gaisa, šķidrumu un gružu nokļūšanu iekšā. Personas, kurām ir krūšu kurvja traumas, nekavējoties jānogādā veselības aprūpes vai traumatoloģijas iestādē stāvokļa novērtēšanai.
- Neizmantojiet Halo XL kā šuvju un citu primāro brūču noseģšanas metožu aizstājēju.
- Mēģinājumi atkārtoti izmantot Halo XL var izraisīt piesārņojumu un infekciju.
- Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnisko ierīču atkritumu utilizēšanas vadlīnijām.
- Nenovietojiet uz izvirzītiem priekšmetiem, jo tas var veidot lielāku savainojumu.

Kontrindikācijas

Nelietot pēcoperācijas vajadzībām.

Īpašību raksturojums

- Pielīp pie ādas virsmas ekstremālos apstākļos un temperatūras diapazonos pat mitruma, pleiras šķidrumu un/vai asiņu klātbūtnē.
- Pārsējs ir paredzēts, lai efektīvi hermetizētu brūces perimetru, lai to pārklātu un aizsargātu.
- Noslēdz krūšu dobumu un ir nelaiž cauri šķidrumu, gaisu un gružus, kas var iekļūt brūcē no ārējās vides.

Klīniskās priekšrocības

- Samazina gaisa, šķidruma vai gružu iekļūšanas risku, kas var piesārņot brūci.
- Nodrošina papildu laiku ārkārtas gadījumos līdz pacienta nogādāšanai ārstniecības iestādē.

Klīniskie efekti

- Efektīvi hermetizē brūces perimetru, ja tiek uzklāts, kā norādījis ražotājs.
- Nelaiž cauri šķidrumu, gaisu un gružus, kas var piesārņot brūci.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

