



## Istruzzjonijiet għall-Użu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



### Deskrizzjoni tal-Prodott

Halo XLs huma apparati mediċi li jikkonsistu minn saff adeżiv ta' idroġell u saff adeżiv ta' wara (mhux tal-latex). Halo XLs ma fihom l-ebda sustanza mediċinali u mhumiex magħmulin minn derivattivi tal-annimali jew umani. Halo XLs huma impermeabbli għal-likwidi u jagħlqu l-ferita. Halo XLs huma maħsuba biex jintużaw sakemm il-pazjent ikun jista' jiġi ttrasportat lejn faċilità tal-kura tas-saħħa, fejn jitneħhew għall-evalwazzjoni tal-pazjent u l-kura ta' wara.

### Indikazzjonijiet għall-Użu

Halo XLs huma ddisinjati biex ikopru u jipproteġu l-feriti. Tużax il-garża bħala sostitut għal suturi u metodi ewlenin oħra tal-għeluq tal-feriti. Halo XLs huma prodott li jintuża darba u tentattivi biex jergġhu jintużaw Halo XLs jistgħu jintroduċu l-kontaminazzjoni u infezzjonijiet.

### Użu Maħsub/Skop Maħsub

Halo XLs huma garża għall-feriti mhux risorbibbli u mhux sterili, okklussivi, maħsuba biex ikopru ferita u biex jipprovdu barriera mekkanika.

### Profil tal-Pazjent

Halo XLs huma maħsuba biex jintużaw f'pazjenti b'ferita toraċika potenzjali.

### Applikazzjoni

1. Naddaf u xxotta ż-żona.
2. Neħhi l-liner trasparenti. Tpoġġihx fuq wiċċ sekondarju qabel l-applikazzjoni sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni.
3. Poġġi Halo XL bin-naħa tal-ġell 'l isfel, iċċentrat fuq il-ferita.
4. Uża pressjoni ħafifa — tistirahx waqt l-applikazzjoni.
5. Kompli vvaluta l-pazjent u mmonitorja l-azzjoni tas-siġill tas-sider. Immonitorja l-pazjent għal sintomi ta' zieda fl-uġiġh jew diffikultà biex jieħu n-nifs.
6. Erġa' ssiġilla l-Halo XL, jekk meħtieġ.
7. Jekk ikun hemm feriti toraċiċi addizzjonali, irrepeti l-passi 1–4 bi prodott Halo XL ieħor.
8. Ittrasporta l-pazjent lejn faċilità tal-kura ta' emerġenza għall-posttrattament u l-evalwazzjoni.
9. Armi wara l-użu, skont il-linji gwida lokali tal-iskart ta' apparati mediċi.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE

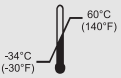

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



# Istruzzjonijiet għall-Użu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



## Twissijiet

- Żgura li l-Halo XL jaghlaq il-perimetru tal-ferita kompletament halli tevita d-dhul tal-arja, likwidi u fdal. Persuni li għandhom korrimenti toraċi għandhom jiġu ttrasportati immedjatament lejn faċilità tal-kura tas-saħħa jew tat-trauma għall-evalwazzjoni.
- Tużax il-Halo XL bħala sostitut għal suturi u metodi ewlenin oħra tal-għeluq tal-feriti.
- Tentattivi biex jerġa' jintuza Halo XL jistgħu jintroduċu l-kontaminazzjoni u infezzjonijiet.
- Armi wara l-użu, skont il-linji gwida lokali tal-iskart ta' apparati mediċi.
- Tpoġġihx fuq oġġetti li johorġu 'l barra, peress li dan jista' jiggrava l-korriment.

## Kontraindikazzjonijiet

Tużax għal applikazzjonijiet ta' wara l-kirurgija.

## Karatteristiċi tal-Prestazzjoni

- Jehel mal-wiċċ tal-ġilda f'kundizzjonijiet estremi u f'medda ta' temperaturi, anke meta jkun hemm l-umdità, fluwidi plewrali u/jew demm.
- Il-garża hija ddisinjata li taghlaq b'mod effettiv il-perimetru tal-ferita biex tkopriha u tiproteġiha.
- Jaghlaq il-kavità toraċika u huwa impermeabbli għal likwidi, l-arja, u fdal li jistgħu jippenetraw il-ferita mill-ambjent estern.

## Benefiċċji Kliniċi

- Inaqqs ir-riskju tad-dhul tal-arja, likwidu, jew fdal li jista' jikkontamina l-ferita.
- Jipprovdni ħin addizzjonali f'każijiet ta' emerġenza sakemm il-pazjent jiġi ttrasportat lejn faċilità tas-saħħa.

## Affermazzjonijiet Kliniċi

- Jaghlaq b'mod effettiv il-perimetru tal-ferita, jekk jiġi applikat skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur.
- Impermeabbli għal-likwidu, l-arja, u fdal li jistgħu jikkontaminaw il-ferita.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

