



Návod na použitie



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Opis výrobku

Náplaste Halo XL sú zdravotnícke pomôcky, ktoré pozostávajú z lepiacej hydrogélovej vrstvy a lepiacej (nelatexovej) podkladovej vrstvy. Náplaste Halo XL neobsahujú žiadne liečivé látky a nie sú vyrobené zo živočíšnych ani ľudských derivátov. Náplaste sú nepriepustné pre tekutiny a utesňujú ranu. Náplaste sú určené na použitie do doby, kým pacient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia, kde budú odstránené, aby sa posúdil stav pacienta a poskytla sa následná starostlivosť.

Indikácie na použitie

Náplaste Halo XL sú určené na krytie a ochranu rán. Nepoužívajte krycie materiály ako náhradu za stehy a iné primárne metódy uzavretia rany. Náplaste Halo XL sú výrobok na jedno použitie a pri pokusoch o opätovné použitie môžu náplaste spôsobiť kontamináciu a infekciu.

Zamýšľané použitie/zamýšľaný účel

Halo XL sú neresorbovateľné a nesterilné okluzívne krycie materiály na rany určené na prekrytie rany a vytvorenie mechanickej bariéry.

Profil pacienta

Náplaste Halo XL sú určené na použitie u pacientov s možným poranením hrudníka.

Aplikácia

1. Vyčistite a osušte miesto.
2. Odstráňte priehľadný lem. Pred aplikáciou neumiestňujte na sekundárny povrch, aby ste zabránili kontaminácii.
3. Umiestnite náplast Halo XL gélovou stranou doprostred rany.
4. Použite mierny tlak – počas aplikácie nenapínajte.
5. Pokračujte v hodnotení pacienta a sledujte činnosť hrudnej chlopne. Monitorujte pacienta, či sa u neho neobjavia príznaky zvýšenej bolesti alebo ťažkostí s dýchaním.
6. V prípade potreby náplast Halo XL opäť utesnite.
7. Ak sú prítomné ďalšie hrudné poranenia, zopakujte kroky 1 až 4 s ďalším produktom Halo XL.
8. Prepravte pacienta do zariadenia núdzovej starostlivosti na následné ošetrenie a posúdenie stavu.
9. Po použití zlikvidujte podľa miestnych smerníc o odpade zo zdravotníckych pomôcok.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Návod na použitie



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Upozornenia

- Uistite sa, že náplast Halo XL úplne utesňuje obvod rany, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu, tekutín a nečistôt. Osoby, ktoré utrpeli poranenia hrudníka, by mali byť okamžite prevezené do zdravotníckeho alebo traumatologického zariadenia na vyšetrenie.
- Nepoužívajte náplast Halo XL ako náhradu za stehy a iné primárne metódy uzavretia rany.
- Pri pokusoch o opätovné použitie môžu náplaste Halo XL spôsobiť kontamináciu a infekciu.
- Po použití zlikvidujte podľa miestnych smerníc o odpade zo zdravotníckych pomôcok.
- Neumiestňujte na vyčnievajúce predmety, pretože to môže zhoršiť zranenie.

Kontraindikácie

Nepoužívajte na pooperačné aplikácie.

Výkonnostné charakteristiky

- Prilne k povrchu kože v extrémnych podmienkach a teplotných rozsahoch, dokonca aj v prítomnosti vlhkosti, pleurálnych tekutín alebo krvi.
- Krycí materiál je navrhnutý tak, aby účinne utesnil obvod rany, čím ju zakryje a chráni.
- Uzatvára hrudnú dutinu a je nepriepustný pre tekutiny, vzduch a nečistoty, ktoré môžu do rany preniknúť z vonkajšieho prostredia.

Klinické prínosy

- Znižuje riziko vniknutia vzduchu, kvapaliny alebo nečistôt, ktoré môžu kontaminovať ranu.
- Poskytuje dodatočný čas v naliehavých prípadoch, kým sa pacient neprevezie do zdravotníckeho zariadenia.

Klinické tvrdenia

- Účinne utesňuje obvod rany, ak sa aplikuje podľa pokynov výrobcu.
- Nepriepustný pre tekutiny, vzduch a nečistoty, ktoré môžu kontaminovať ranu.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT



DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN




NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED



DO NOT REUSE

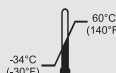

STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

